

INFORMATION

No. 2312-34

測定条件変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、LOX-indexの測定条件に関して、解析会社より以下のとおり1月より洗浄過程の作業変更をする旨の連絡がありました。なお、変更に伴ったリスク評価や基準値の変更などはございません。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 検査項目 LOX-index [コード 4441]

【経緯】

- LOX-indexの測定数増加に伴い、非特異的な反応が見られる検体が発生しております。その対策として、測定条件の洗浄過程に以下の変更を加えることになりました。

	変更後	現行
sLOX-1の洗浄条件	洗浄液分注30秒後に吸引	洗浄液分注後すみやかに吸引
LABの洗浄条件	洗浄液分注、混和して吸引	洗浄液分注後すみやかに吸引

【検査値への影響】

- 測定値への影響は裏面相関図のとおり軽微で、リスク評価や基準値などの変更はございません。

(裏面に続く)

■ 変更日

2024年 1月 10日(水) 以降測定分より

株式会社 武蔵臨床検査所



* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8

TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659

URL <http://www.e-musashi.co.jp>

【相関図】

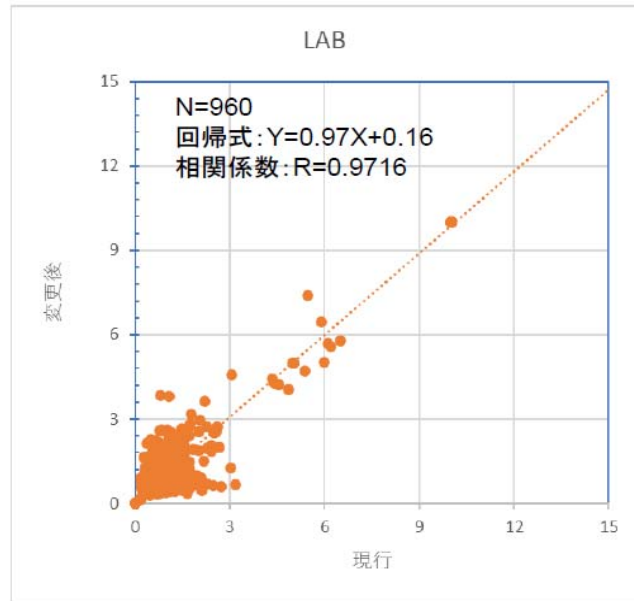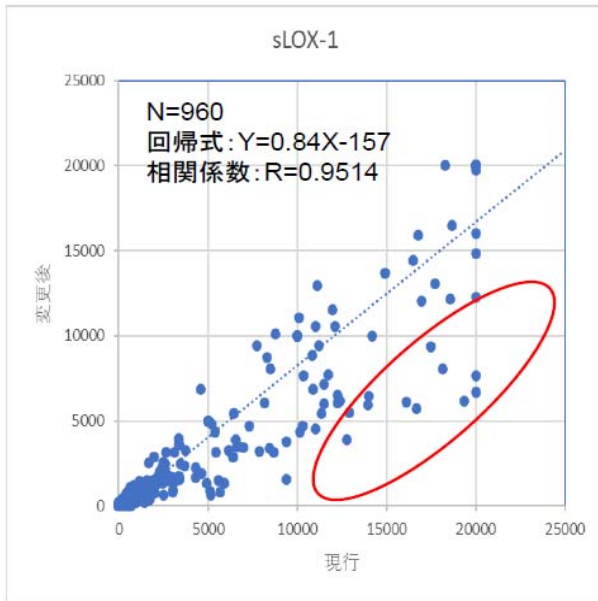

赤枠部分が洗浄条件の変更による改善部分になります。